

動物の受精卵の効果的な凍結に！

高性能小型プログラムフリーザー

エタノール液槽式受精卵凍結用

FZ-1500ET



各種サンプルに適した凍結プログラムで、細胞へのダメージを最小限にし、再現性の高い凍結を可能にしました。

卓上型コンパクト設計で、-80℃までパソコンで簡単に設定できます。

◆従来法と同様に使用していただけます。

エタノール モデル



■植氷・凍結用ラックが付属します



フリージング部
サンプルの温度計測が可能



クライオチューブ
26本セットラック

液体窒素不要

- ・スターリング方式の冷却により液体窒素不要。
- ・ランニングコストが削減できます。
- ・※エタノール約250cc必要です。

コンパクト設計

- ・軽量小型設計。
- ・パーソナルユースとしてもご使用いただけます。

パソコンでのデータ管理機能

- ・ご希望の凍結パターン・プログラムの設定可能。
- ・パソコンでの温度モニタリング及び記録が可能。
- ・レポート出力機能


★カスタマイズ設計製作致します。

■ 仕様


	FZ-1500ET
温度表示	サンプル温度表示
レポート出力	サンプル温度のレポート出力
冷却速度	-0.1~°C/min
エタノール槽	φ100×深さ32mm
エタノール容量	約250cc
ラック	クライオチューブ26本セット
到達温度	-80°C (MAX)
温度調節	PID制御
外形寸法	W320×D220×H430mm
電源	AC100/240V, 50/60Hz, MAX 150W
製品質量	12.5kg
付属品	ノートパソコン

■ 操作画面

温度設定画面

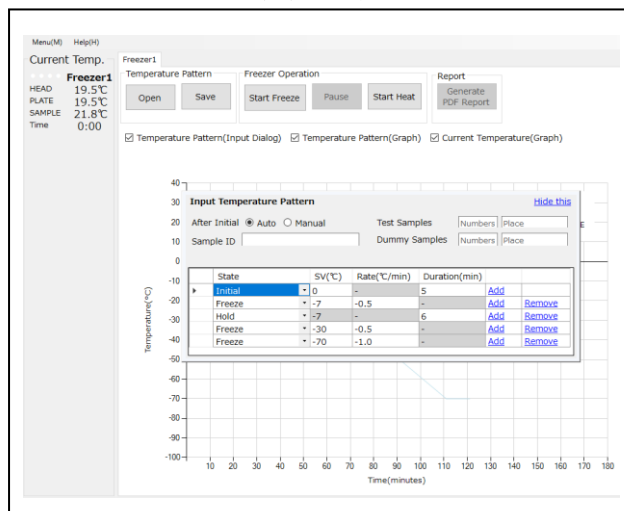

レポート出力画面

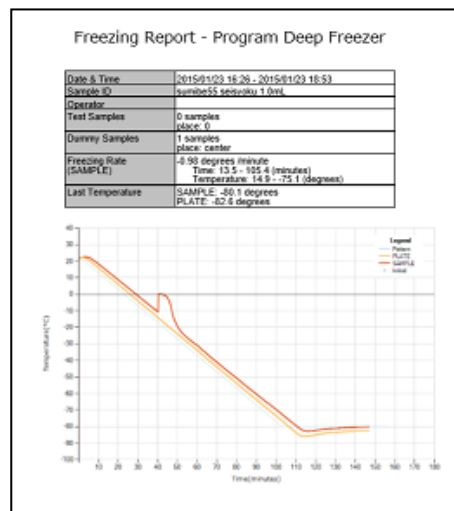

※機器の仕様は変更となる場合があります。最新の仕様はお問い合わせ下さい。



ストレックス株式会社

大阪市北区大淀中 1-8-34

TEL 06-6131-9602 FAX 06-6131-9603

WEB : www.strex.co.jp E-Mail : info@strex.co.jp

<販売代理店>